


Компания «Medical Marketing Group L.L.C.» является официальным представителем CytoTherm на территории Республики Казахстан и Средней Азии.

Сухое, удобное и стерильное оттаивание



Сухое размораживание
Фильтрованный воздух
4 мешка за один раз
"Массажирует" плазму

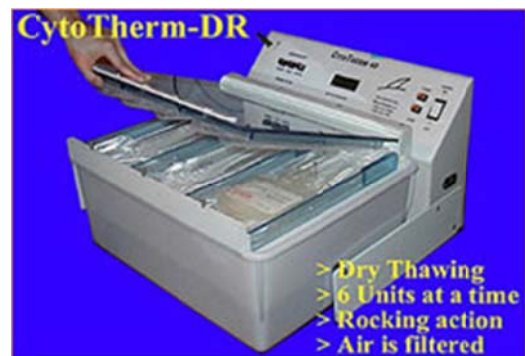

Сухое размораживание
6 мешков за один раз
Фильтрованный воздух

а также удобные управляемые в цифровой форме водные термостаты



Компактный 22 см. шириной
Защита входных портов
4 мешка за один раз
18×20 см. (7" × 8") мешков



Защита входных портов
12 мешков с плазмой за один раз
Быстрое перемешивание

CytoTherm – преимущество сухого размораживания:

CytoTherm–D4 НОВИНКА!

– Использует изобретательную систему "массажирования"

CytoTherm – Множество преимуществ сухого размораживания:

- Плазменные мешки находятся постоянно сухими, что недопускает роста бактерий.
- Удобная погрузка – просто загрузить мешки с плазмой и закрыть крышку.
- Датчики обнаружения утечек, звучит сигнал тревоги и отключает перемешивание в случае возникновения утечки.
- Отдельные отсеки изолирования утечек.




Representing Innovative Medical and Surgical Products

- Входящий и выходящий воздух фильтруется, что способствует содержанию внутренней чистоты воды.
- Очистку рекомендуется производить не реже одного раза в три месяца.

CytoTherm-DR (сухое раскачивание)

Оригинальная (станд. в ожидании) массирующая система, которая использует технологию выступов. Нет никаких ненадежных механических деталей. Два насоса герметизируют различные сегменты пузыря, чтобы мягко массажировать мешки с плазмой. Использует качающееся действие, чтобы размешать плазму. Замороженная плазма плавает назад и вперед в мешках с плазмой по мере размораживания.

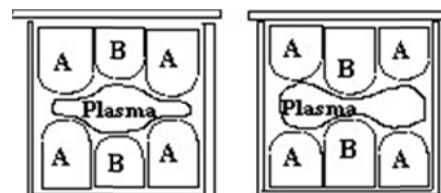

Цифровой дисплей – контроля уровня жидкости

- Мешки с плазмой расположены выше уровня жидкости
 - Загрузка и выгрузка осуществляется сухими руками
- CytoTherm-4S**
- Оптимальная ширина составляет 22 см (8½")
 - Использование сидинга для постоянного перемешивания с плазмой.
- CytoTherm-4T**
- Используется постоянное перемешивание с плазмой.

Образцовая спецификация

Модель	CT-D4	CT-DR	CT-4S	CT-4T
Сухой/Мокрый	Сухой	Сухой	Мокрый	Мокрый
Вместимость мешков с плазмой	4×450 мл 2×1,000 мл	6×450 мл 3×1,000 мл	4×450 мл	12×450 мл**
Макс. размер мешков	1,000 мл	1,000 мл	18 см (7") ширина × 20 см (8") высота	450 мл
Время оттаивания*	15 мин.	16 мин.	14 мин.	12 мин.
Сигнализация/ превышение температуры	Да	Да	Нет	Нет
Ширина	33 см (13")	56 см (22")	22 см (8.5")	56 см (22")

* При полной загрузке 300 мл. мешков с 250 мл. плазмы, замороженные на 48 часов при -22°C

** Большая вместимость -- 12 мешков по 450 мл с плазмой

По всем интересующим Вас вопросам обращаться:

**«Medical Marketing Group L.L.C» USA 5042 Yuma Lane N. Plymouth, MN 55446
p:612.386.0298 f:651.305.7078 www.medicalmarketinggrp.com**

**Филиал «Medical Marketing Group L.L.C» в городе Алматы, мик-он Мурас 45 оф 167
Телефон +7/727/ 300-31-16 мобильный +7 701 714 33-24 info@medicalmarketinggrp.com**